

English

- 1 Ear-Plasty
- 2 Elastic strap
- 3 Knurled nut
- 4 Pressurizer - left
- 5 Pressurizer - right
- 6 Basis-structuur

Cosmetic ear corrector



Prepare the area by cleaning the skin of any traces of moisture, dirt and oil.



Attach the elastic bands to the base and choose the largest position so that the Ear-Plasty can be easily applied to the head.



Now that the Ear-Plasty is attached to the head, you can determine the desired size by means of the adjusters.



When the Ear-Plasty is properly attached, you can let the pressure exert the desired pressure on the ears by turning the knurled nuts.



Note: The size and elasticity of the ear may affect the final result of the Ear-Plasty.

Nederlands

- 1 Ear-Plasty
- 2 Elastische band
- 3 kartel moer
- 4 Druk uitvoerder - links
- 5 Druk uitvoerder - rechts
- 6 Base-structuur

Cosmetische oorcorrector



Maak de zone schoon door vocht-, vuil- en vetresten van de huid te verwijderen.



Bevestig de elastische banden aan de basis. Kies voor de grootste stand zodat de ear plasty makkelijk op het hoofd aangebracht kan worden.



Nu de Ear-Plasty op het hoofd is aangebracht kunt u doormiddel van de verstellers het gewenste formaat bepalen.




Wanneer de Ear-Plasty juist bevestigd is, kunt u de drukuitvoerder de gewenste druk op de oren laten uitoefenen, door aan de kartelmoeren te draaien.



Let op: Het formaat en de elasticiteit van het oor kunnen het uiteindelijke resultaat van de Ear-Plasty mogelijk beïnvloeden.

EAR-PLASTY

Cosmetic Ear Corrector

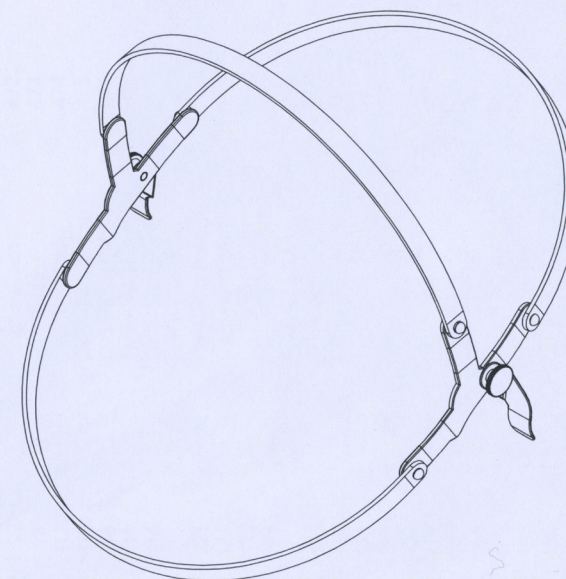

Includes

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1 Ear-Plasty | 4 Pressurizer - left |
| 2 Elastic strap | 5 Pressurizer - right |
| 3 Knurled nut | 6 Basis-structuur |

EAR-PLASTY/78020 USER GUIDE